


## 機械器具 84 付属品で厚生省令で定めるもの

一般医療機器 モータなし画像診断用観察装置 36488000

## イージービュー オートライトビューア (拡大レンズ付き)


## 【形状・構造及び原理等】

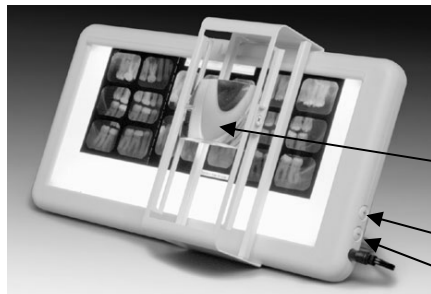

拡大レンズ (2 倍)

+ボタン

-ボタン

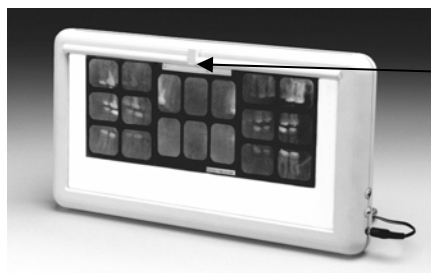ユニバーサル  
フィルムクリップ  
(ビューエリア上部)標準寸法：216×419×32mm  
(ビューエリア：152×343mm)

重量：約 1.7 kg

光源：冷陰極ランプ

電氣的定格：電源 AC110V 50/60Hz

付属品：電源コード、デスクトップ用スタンド、拡大レンズ

## 【使用目的、効能又は効果】

フィルムに記録した X 線などの画像を、保持・固定して投光するモータなしの装置である。

## 【品目仕様等】

光源耐用期間：約 10,000 時間

## 【操作方法又は使用方法等】

使用前に添付の取扱説明書を良くお読みください。

## [本体設置方法]

1. 取扱説明書に従って本体の設置を完了してください。
2. 本体設置後、電源コードを接続します。

## [操作方法]

1. 手動操作
  - (1)+ボタン、-ボタンの一方を押すとビューエリアが点灯します。
  - (2)+ボタン、-ボタンを同時に押すとビューエリアが消灯します。
2. 自動操作
  - (1)ビューエリア上のユニバーサルフィルムクリップ中央に X 線フィルムを差し込むと自動的にビューエリアが点灯します。
  - (2)ビューエリア上の X 線フィルムを取りはずしてから 5 分後に自動的にビューエリアが消灯します。X 線フィルムを取り付けたままの状態では自動的にビューエリアは消灯しません。X 線フィルムを取り外すか、手動操作でビューエリアを消灯してください。
3. 明るさの調節  
本体側面の + ボタン、- ボタンでビューエリアの明るさを調節してください。

## [使用方法に関連する使用上の注意]

1. 濡れている X 線フィルムはできるだけ使用しないこと。
2. 電源を切る際は、プラグを抜いて電源を切ること。
3. 可燃性、引火性、爆発性の液体やガスの近くで使用しないこと。
4. 付属の電源コードのみを使用すること。
5. 本体は多湿を避け、0～40℃の屋内で使用すること。

## 【使用上の注意】

## [重要な基本的注意]

1. 使用前に取扱説明書をよく読むこと
2. 感電、その他の危険の為、カバーなどを開け、本体内部に触れないこと。
3. 故障したときは、訓練を受けた有資格者以外は修理しないこと。
4. 本体の清掃、修理等を行うときは、電源コードを取りはずすこと。
5. 本体に破損・変形等の異常があった場合には使用しないこと。
6. 本体は記載の使用目的以外には使用しないこと。
7. 本体は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

## 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

## [貯蔵・保管方法]

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 温度、湿度、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより、悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
3. 傾斜のない、振動衝撃などのかからない場所に安定な状態にして、保管すること。
4. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
5. 本体の光源には水銀が使用されている為、本体を廃棄するときは法規制に従うこと。
6. 本体は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

## 【保守・点検に係わる事項】

1. 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
2. 本体の清掃には、研磨剤を使用しないこと。
3. 拡大レンズの清掃には、レンズ専用クロス等を使用すること。
4. しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に機器が正常に、かつ安全に作動することを確認すること。

## 【包装】

イージービュー オートライトビューア (拡大レンズ付き)

- |                |     |
|----------------|-----|
| (1)本体          | 1 個 |
| (2)電源コード       | 1 本 |
| (3)デスクトップ用スタンド | 1 ケ |
| (4)拡大レンズ       | 1 ケ |

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 製造販売元 | デンツプライ三金株式会社                |
| 住所    | 栃木県大田原市下石上 1382 番 11        |
| 製造国   | アメリカ合衆国                     |
| 製造元   | デンツプライ リン社<br>DENTSPLY Rinn |

## [問い合わせ窓口]

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| カスタマー・サービス・センター |              |
| 電話番号            | 0120-789-123 |
| FAX 番号          | 0120-789-129 |

取扱説明書を必ずご参照ください。